



Vermeidung einer
perioperativen Hypothermie
durch konvektive Erwärmung¹

cocoon – Patientenwärmesystem

Konvektives Patientenwärmesystem cocoon CWS 5000 für das prä-, intra- und post-operative Wärmemanagement.

Die Vorteile im Überblick

- Verschiedene Wärmedecken für unterschiedlichste operative Anwendungen
- Wärmedecken für Pre-warming und adipöse Patienten
- Einfache Handhabung und schnelle Befestigung an Infusionsständern, Betten etc.
- Anwenderfreundliches Patientenwärmesystem, intuitive Bedienung mit automatischer Temperaturregulierung
- Wechsel des HEPA Filters nur alle 2.000 Stunden
- Gleichmäßige Verteilung gefilterter Warmluft über den Körper durch Mikroperforation
- Potenzielle Reduktion der Kosten für Folgeerkrankungen und Beschleunigung der Wundheilung
- Sorgt für einen besseren Allgemeinzustand des Patienten
- Der bewährte cocoon CWS für flexible Temperaturmanagementlösungen
- CWS 5000 mit zweistufigem Lüftermotor und zwei Stufen für mehr Luftvolumen

¹ NICE Guideline „Hypothermia: prevention and management in adults having surgery (Clinical guideline [CG65] Published date: April 2008 Last updated: December 2016); DGAI S3-Richtlinie „Vermeidung von perioperativer Hypothermie“ - Aktualisierung 2019 - Finale Version vom 15.05.2019


cocoon – Patientenwärmesystem

Standarddecken latexfrei



CLM 0101 Ganzkörperdecke


100 x 195 cm

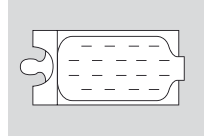

Großzügig geschnitten

Art.-Nr.: 00000950

CLM 0104 Oberkörper - Arme außen 57 x 196 cm

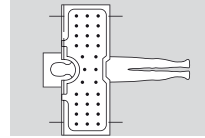


Transparente Gesichts-
maske für Wärme-
erhalt am Kopf

Art.-Nr.: 00000949

CLM 0102 Unterkörper


100 x 120 cm

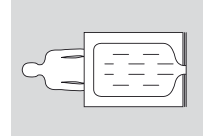

Großzügiges Klebeband
zur Befestigung der
Decke am Abdomen

Art.-Nr.: 00000951

CLM 0103 Oberkörper - Arme innen 96 x 132 cm

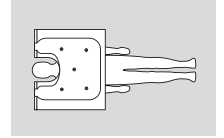


Großzügiges Klebeband
zur Befestigung der
Decke am Abdomen

Art.-Nr.: 00000952

CLM 0108 Zugang Kardiologie

100 x 195 cm

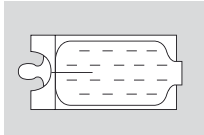


40 cm langer Schlitz
vom Halsbereich über
Brustkorb bis Abdomen
für einen einfachen
Zugang

Art.-Nr.: 00000956

CLM 0121 Mehrfachzugang

100 x 195 cm

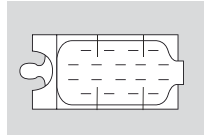


Flexible Gestaltung für
chirurgischen Zugang
durch Umschlagen von
Deckenteilen

Art.-Nr.: 00000962

CLM 0105 Neonatal/Pädiatrie

89 x 95 cm

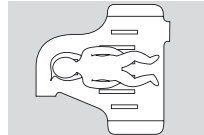


Neonat liegt auf
gestepptem Bereich

2 transparente Kunst-
stoffbahnen für extra
Wärme

Art.-Nr.: 00000953

CLM 0106 Schlauch/Pädiatrie

60 x 123 cm

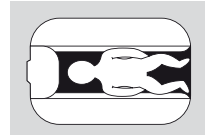


Vollständiger
Operationszugang

1 transparente Kunst-
stoffbahn

Art.-Nr.: 00000954

CLM 0107 Kind/Pädiatrie

99 x 134 cm

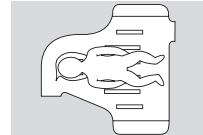


Vollständiger
Operationszugang

2 transparente Kunst-
stoffbahnen für extra
Wärme

Art.-Nr.: 00000955

CLM 0112 Mehrzweck-Luftsack/ Pädiatrie 12 x 100 cm

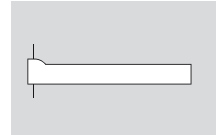


Vollständiger
Operationszugang

Wärmezufuhr in Quer-
und Längsrichtung

Art.-Nr.: 00000957

CLM 0115 Groß zum Unter- legen/Pädiatrie 100 x 120 cm

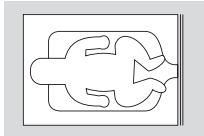


Vollständiger
Operationszugang

Luft strömt in Quer-
und Längsrichtung am
Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00000958

CLM 0116 Klein zum Unter- legen/Pädiatrie 62 x 87 cm

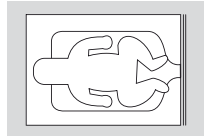


Vollständiger
Operationszugang

Luft strömt in Quer-
und Längsrichtung am
Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00000959

CLM 0117 Unterkörper/ Pädiatrie 62 x 93 cm

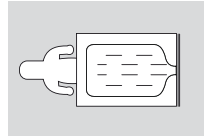

Vollständiger
Operationszugang


Luft strömt in Quer-
und Längsrichtung am
Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00000960

Spezial- und herzchirurgische Wärmedecken latexfrei




CLM 0118 Zugang abdominale Chirurgie 195 x 184 cm

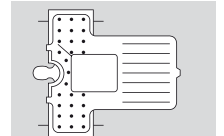

Ausschnitt über Brust-
korb und Abdomen
für einen einfachen
Zugang

Art.-Nr.: 00000961

CLM 0122 Intraoperativ - Erwachsener 90 x 217 cm

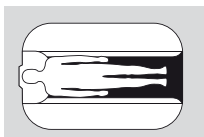


Vollständiger
Operationszugang

Luft strömt in Quer-
und Längsrichtung am
Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00000963


CLM 0124 Chirurg. Zugang - Arme innen 100 x 195 cm

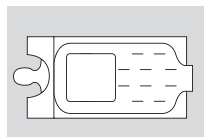

Großer Ausschnitt
über Brustkorb und
Abdomen für einen
einfachen Zugang

Art.-Nr.: 00000964


CLM 0125 Lithotomie & Laparoskopie 195 x 187 cm

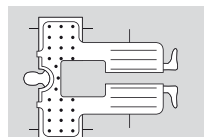

Ausschnitt über Brust-
korb und Abdomen für
einfachen Zugang bei
flexibler Beinbewegung

Art.-Nr.: 00000965

CLM 0127 Erwachsener - Unterlage 90 x 206 cm

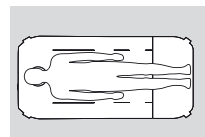


Uneingeschränkter
chirurgischer Zugang
zum Patienten

Drainage

Art.-Nr.: 00000966

CLM 0202 Unterkörper - Kardial 100 x 120 cm

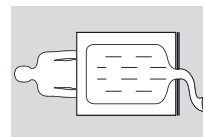

Extra langer Schlauch-
anschluss, großzügiges
Klebeband zur Be-
festigung der Decke am
Abdomen


Art.-Nr.: 00001067

Intraoperative Wärmedecken latexfrei



CLM 0126 Unterkörper - breit

150 x 120 cm

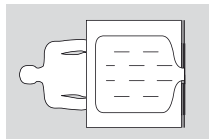


Großzügiges Klebeband zur Befestigung der Decke am Abdomen

Art.-Nr.: 00001022

CLM 0128 Ganzkörperperdecke - breit

150 x 203 cm

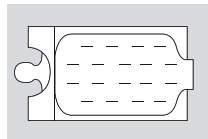


Großzügig geschnitten

Art.-Nr.: 00001023

CLM 0129 Unterkörper - lang

100 x 160 cm

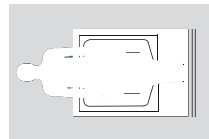


Großzügiges Klebeband zur Befestigung der Decke am Abdomen

Art.-Nr.: 00001024

CLM 0130 Ganzkörperperdecke - lang


100 x 195 cm

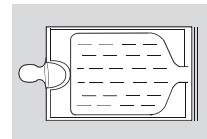

Großzügig geschnitten

Art.-Nr.: 00001025


CLM 0131 Oberkörper - Arme innen lang 130 x 99 cm

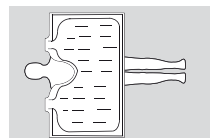

Großzügiges Klebeband zur Befestigung der Decke am Abdomen

Art.-Nr.: 00001026


CLM 0132 Oberkörper - Arme außen lang 76 x 198 cm

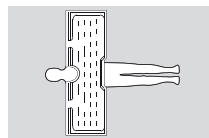

Transparente Gesichtsmaske für Wärmehalt am Kopf

Art.-Nr.: 00001027

CLM 0133 Unterkörper - Spinal 83 x 194 cm

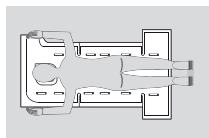


Intraoperative Wärmedecke

Universelles System zur Befestigung der Decke

Art.-Nr.: 00001028

CLM 096 Hemd XL

130 x 135 cm

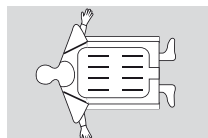


Vollständiger Operationszugang

Luft strömt in Quer- und Längsrichtung am Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00001029

CLM 097 Hemd L

127 x 135 cm

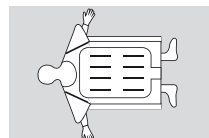


Vollständiger Operationszugang

Luft strömt in Quer- und Längsrichtung am Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00001030

CLM 098 Hemd M

117 x 130 cm

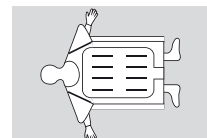


Vollständiger Operationszugang

Luft strömt in Quer- und Längsrichtung am Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00001031

CLM 099 Hemd S

90 x 98 cm

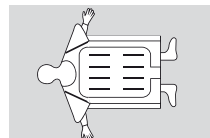


Vollständiger Operationszugang

Luft strömt in Quer- und Längsrichtung am Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00001032


CLM 0137 Lithotomie - Unterlage 90 x 169 cm

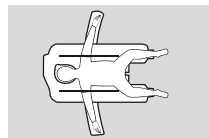

Uneingeschränkter chirurgischer Zugang, flexible Bewegung der Beine, Drainage, Armschlitz

Art.-Nr.: 00001068

CLM 0138 Erwachsener - Unterlage 96 x 225 cm

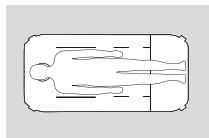


Uneingeschränkter chirurgischer Zugang, Abmessungen für große Patienten, Armschlitz

Art.-Nr.: 00001069

Pädiatrische Wärmedecken



CLM 0109 Ganzkörperperdecke - Kind 100 x 120 cm

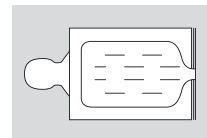

Vollständiger Operationszugang

Luft strömt in Quer- und Längsrichtung am Patienten vorbei

Art.-Nr.: 00001021

= Lagerware

cocoon – Patientenwärmesystem

Sicherheit / Nutzen

- Wärmegerät mit unterschiedlichen Leistungsstufen (CWS 5000: 45,1 CFM2 und 57 CFM2 bei vollem Leistungsabruf)
- Optische und akustische Alarmsignale bei Nichterreicherung der ausgewählten Temperatur
- Sichere Anwendung durch automatische Abschaltung bei Übertemperatur und Fehlermeldung gewährleistet
- Umfassendes Zubehör erhältlich
- Umfängliche Servicekonzepte an Ihren persönlichen Bedarf angepasst



Typ	Cocoon Patientenwärmesystem CWS 5000
Leistungsabruf	45,1 CFM* und 57 CFM*
Netzanschluss	220-240 V / 50 Hz
Temperaturbereich	34°C, 40°C, 43°C oder 46°C
Filterart/Lebenszeit	Bakteriologischer HEPA Filter / 2.000 Stunden

Maße Wärmegerät	29 cm x 22 cm x 40 cm
Gewicht	6 kg
Sicherheitsklasse	IIb
Zertifizierung	CE 0805

* CFM = cubic metres per hour (m³/h)

Made in Australia

Vertrieben durch:
Barkey GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 8
33818 Leopoldshöhe
Deutschland

Tel +49 (0) 5202 / 9801-0
Fax +49 (0) 5202 / 9801-99
info@barkey.de · www.barkey.de