

Transfundieren und Leben retten in Sekunden



ALUMINIUMFREI

Rapid Infuser RI-2

Der Rapid Infuser RI-2 setzt neue Maßstäbe beim Erwärmen von Transfusionen und Infusionen.



Die Vorteile im Überblick

- Aluminiumfreies Gerät
- Exakte Bilanzierung: Eine peristaltische Rollenpumpe erlaubt präziseste Einstellung der Flüssigkeitsmenge von 2,5 bis 1.000 ml/min sowie eine genaue Bilanzierung der zugeführten Flüssigkeitsmenge
- Sicherheit: Zwei Luftdetektoren sorgen für automatische Luftentfernung
- Automatische und permanente Überwachung des Zugangsdrucks
- Schnelligkeit: Sofortige Erwärmung durch innovative Induktionsheizung
- Keine Wasserbäder oder Heizplatten
- Touchscreen mit Schritt-für-Schritt Anweisungen
- Benutzerkontrollierte Bolus-Infusion

Rapid Infuser RI-2

Verbrauchsmaterial (optional)

- 3-Dorn-Einmalwärmeset
- 3 Liter Einmalwärmeset
- 3 Liter Reservoir
- Zweifache Patientenleitung
- Patientenleitungsverlängerung

Einmalwärmesets funktionieren als „ready to run“-Systeme und reichen als Komplettsset am Patienten aus.

Mobilität

Geräteklemme für das schnelle Anbringen und Entfernen am Infusionsständer sowie leichte Handhabung durch einen Tragegriff.

Akku


Integrierter Akku für den Transport. Betreibt alle Funktionen ohne Wärmen.

Sensoren

2 Luftdetektoren, Drucksensoren, 2 Temperatursonden (Infraroterfassung), Sensor für die Fließgeschwindigkeit, Tür-offen-Detektor und Ventilaktivierungssensor.

Kontrollcomputer

Redundanter Hardware-Überbrückungsschutz für den Fall eines Gerätefehlers.

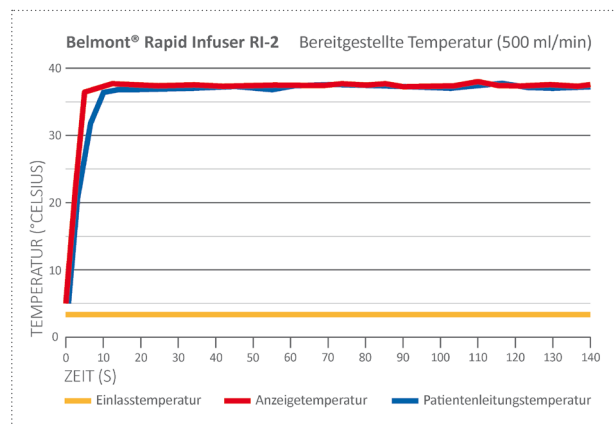

Produkt	Rapid Infuser RI-2
Netzanschluss	220-240 V oder 115 V Wechselstrom
Abmessungen	342,9 x 190,5 x 304,8 mm (BxTxH)
Gewicht	12,7 kg
Flüssigkeitspumpe	Peristaltische Pumpe (Rollertyp) Flussrate 2,5 - 1000 ml/min

Heizgerät	Max. eingesetzte Leistung 1440 W
Display	LCD mit wasserfestem Touchpad Außenmaß: 148,1 x 104,7 mm Gebrauchsfläche: 115,1 x 86,3 mm
Barkey ist zertifiziert	DIN EN ISO 13485