



Blut- und Infusionswärmer  
– sicher und zuverlässig

## Barkey S-line

Barkey S-line wärmt Infusionen und Blutprodukte bis zum Patienten. Es hilft den Heilungsprozess der Patienten zu beschleunigen und durch die Vermeidung einer Hypothermie wird das Krankenhausbudget geschont.

### Die Vorteile im Überblick

- Wärmt Infusionslösungen, Plasma und Blutprodukte bis zum Patienten
- Wärmeprofil für jedes handelsübliche Infusionsset geeignet
- Einfache Bedienung und Sicherheit durch feste Temperatureinstellung
- One-touch control
- Verwendet keine zusätzlichen Einmalartikel
- Anzeige der Ist-Temperatur im Display
- Verwendung biokompatibler Materialien
- Optisches und akustisches Signal bei Störung
- Verfügbar in 2 verschiedenen Durchmessern (5 mm, 7 mm) und Längen (1,2 m, 1,5 m)
- Einsetzbar bei der Wärmung von Blutrückflussleitungen (z. B. Dialyse)


# Barkey S-line

## Sicherheit

- Integrierte Temperatursensoren
- Übertemperaturalarm
- Glatte Oberflächen ermöglichen einfache Reinigung und Desinfektion
- Bedienfreundlichkeit durch voreingestellte Solltemperatur

## Vermeidung einer Hypothermie

Wärme ist der Schlüssel zum Wohlbefinden jedes Patienten. Das kostengünstige Barkey S-line erleichtert die Behandlung und beschleunigt den Heilungsprozess der Patienten. Durch die Vermeidung einer Hypothermie werden Liegezeiten verkürzt und das Krankenhausbudget nachhaltig geschont.

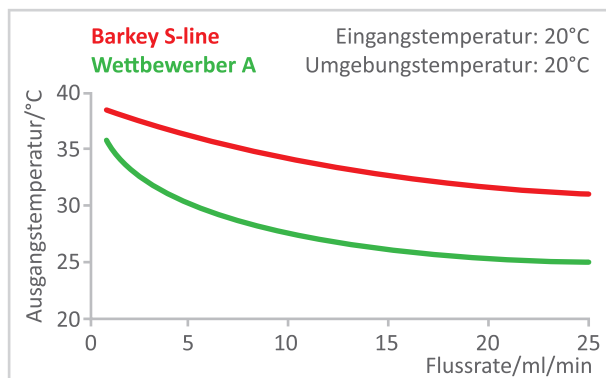

Typ	Barkey S-line
Netzanschluss	100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	115-139 VA
Temperatureinstellung	+37°C oder +39°C
Länge Wärmeprofil	1,5 m
Passend für	4,0–5,0 mm oder 6,0–7,0 mm
Infusionssetdurchmesser	
Anschlussleitung	3 m
Gewicht	ca. 1,3 kg

MDD-Klassifizierung	Ila
Schutzklasse	I, Schutzerdung
Feuchtigkeitsschutz	IP X2
Schutzgrad	BF, defibrillationsgeschützt / äußere und innere Anwendung am Patienten mit isoliertem Anwendungsteil
Kennzeichnung	CE 0123
Barkey ist zertifiziert	DIN EN ISO 13485

**Barkey GmbH & Co. KG**

Gewerbestraße 8  
33818 Leopoldshöhe  
Deutschland

Tel +49 (0) 5202 / 9801-0  
Fax +49 (0) 5202 / 9801-99  
info@barkey.de · www.barkey.de